




FINESIA

Tissue Level

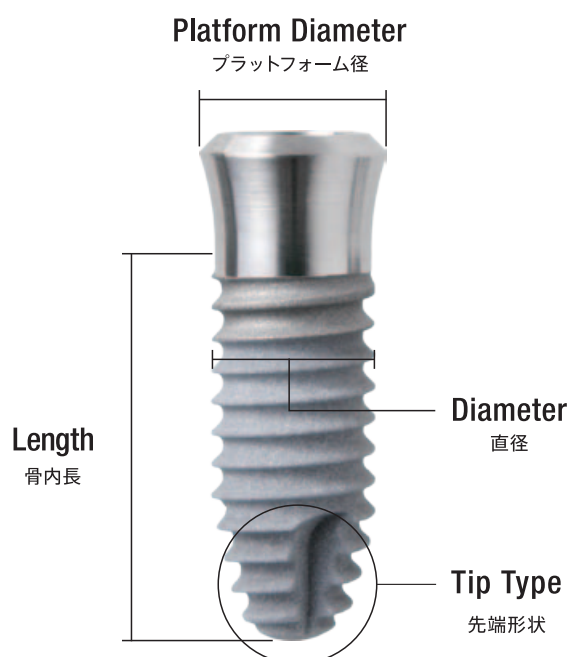

(単位:mm)

Platform プラットフォーム	RP Regular Platform		WP Wide Platform	
	Platform Diameter プラットフォーム径		Diameter 直径	
Tip Type 先端形状	Diameter 直径		Diameter 直径	
	Tip Type 先端形状		Tip Type 先端形状	
Surface 表面処理	Diameter 直径		Diameter 直径	
	Surface 表面処理		Surface 表面処理	
Length 骨内長	Length 骨内長		Length 骨内長	
	Length 骨内長		Length 骨内長	

Prosthetic Parts

上部構造パーツ

Tissue Level

System Tree

◆...RP ◆...WP



Impression Parts & Analog

印象用パーツ & アナログ



Cover Screw & Healing AB

カバースクリュー & ヒーリングアバットメント




Tissue Level

RP

Regular Platform

φ3.7 φ4.2 φ4.7

インプラント（マウントフリータイプ）

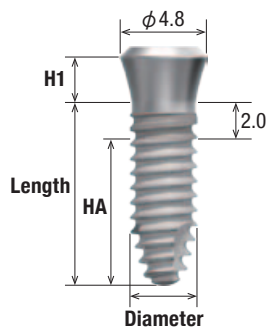

TL HA TP RP MF

Tapered type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
8.0	6.0		FTL-HA37-8TP25RP-MF	BCD013673
10.0	8.0	2.5	FTL-HA37-10TP25RP-MF	BCD013674
12.0	10.0		FTL-HA37-12TP25RP-MF	BCD013675

Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
8.0	6.0		FTL-HA42-8TP25RP-MF	BCD013681
10.0	8.0	2.5	FTL-HA42-10TP25RP-MF	BCD013682
12.0	10.0		FTL-HA42-12TP25RP-MF	BCD013683


Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
8.0	6.0		FTL-HA47-8TP25RP-MF	BCD013689
10.0	8.0	2.5	FTL-HA47-10TP25RP-MF	BCD013690
12.0	10.0		FTL-HA47-12TP25RP-MF	BCD013691

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

(ヒーリングAB1.5mm 1個同梱)



表面処理 **HA**
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

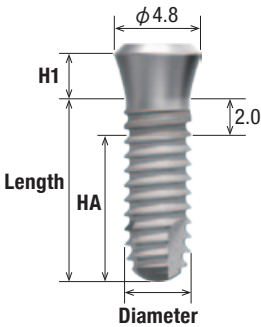

TL HA ST RP MF

Straight type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
6.0	4.0	2.5	FTL-HA37-6ST25RP-MF	BCD013629
8.0	6.0		FTL-HA37-8ST25RP-MF	BCD013630
10.0	8.0		FTL-HA37-10ST25RP-MF	BCD013631
12.0	10.0		FTL-HA37-12ST25RP-MF	BCD013632

Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
6.0	4.0	2.5	FTL-HA42-6ST25RP-MF	BCD013639
8.0	6.0		FTL-HA42-8ST25RP-MF	BCD013640
10.0	8.0		FTL-HA42-10ST25RP-MF	BCD013641
12.0	10.0		FTL-HA42-12ST25RP-MF	BCD013642


Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
6.0	4.0	2.5	FTL-HA47-6ST25RP-MF	BCD013649
8.0	6.0		FTL-HA47-8ST25RP-MF	BCD013650
10.0	8.0		FTL-HA47-10ST25RP-MF	BCD013651
12.0	10.0		FTL-HA47-12ST25RP-MF	BCD013652

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

(ヒーリングAB1.5mm 1個同梱)



表面処理 **HA**
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

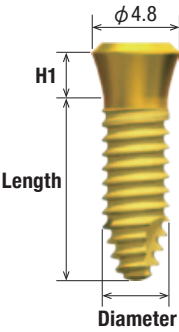

TL AO TP RP MF

Tapered type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	2.5	FTL-A037-8TP25RP-MF	BCD013595
10.0		FTL-A037-10TP25RP-MF	BCD013596
12.0		FTL-A037-12TP25RP-MF	BCD013597

Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	2.5	FTL-A042-8TP25RP-MF	BCD013603
10.0		FTL-A042-10TP25RP-MF	BCD013604
12.0		FTL-A042-12TP25RP-MF	BCD013605

Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
8.0	2.5	FTL-A047-8TP25RP-MF	BCD013611
10.0		FTL-A047-10TP25RP-MF	BCD013612
12.0		FTL-A047-12TP25RP-MF	BCD013613


Diameter = (直径) Length = (骨内長)

(ヒーリングAB1.5mm 1個同梱)



表面処理 **AO**
Anode Oxidization (陽極酸化)

インプラント (マウントフリータイプ)

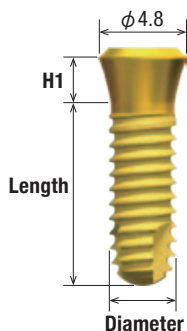

TL A0 ST RP MF

Straight type

Diameter $\phi 3.7$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	2.5	FTL-A037-6ST25RP-MF	BCD013551
8.0		FTL-A037-8ST25RP-MF	BCD013552
10.0		FTL-A037-10ST25RP-MF	BCD013553
12.0		FTL-A037-12ST25RP-MF	BCD013554

Diameter $\phi 4.2$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	2.5	FTL-A042-6ST25RP-MF	BCD013561
8.0		FTL-A042-8ST25RP-MF	BCD013562
10.0		FTL-A042-10ST25RP-MF	BCD013563
12.0		FTL-A042-12ST25RP-MF	BCD013564

Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm			
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	2.5	FTL-A047-6ST25RP-MF	BCD013571
8.0		FTL-A047-8ST25RP-MF	BCD013572
10.0		FTL-A047-10ST25RP-MF	BCD013573
12.0		FTL-A047-12ST25RP-MF	BCD013574

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

(ヒーリングAB1.5mm 1個同梱)



表面処理 **A0**
Anode Oxidization (陽極酸化)

RP

WP

インスツルメント

FINESIA TL

キャップ

カバースクリュー

免荷期間中のインプラント体を封鎖して保護します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-COVER SCR-RP	BCD013000	




HEXALO DRIVER

アバットメント、上部構造、印象パーツ

スプリントアバットメント

スクリュー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP AB-RP	BCD013114

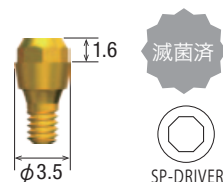

スプリントヒーリングキャップ

最終補綴物が製作されるまでの間、スプリントアバットメントに装着します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP HEAL CAP-RP	BCD013125

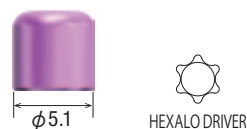


(シリンダースクリュー1本入)

テンポラリーシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-T CYLINDER-ST-RP	BCD013120

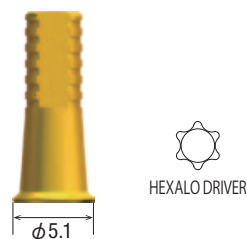


(シリンダースクリュー1本入)

(単冠用)

テンポラリーシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-T CYLINDER-R-RP	BCD013121

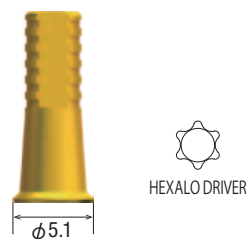


(シリンダースクリュー1本入)

(連結冠用)

ゴールドシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリュー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-G CYLINDER-ST-RP	BCD013116
(シリンダースクリュー1本入) (単冠用)	

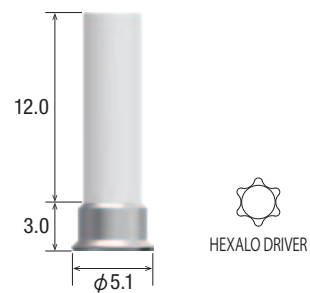

ゴールドシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリュー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-G CYLINDER-R-RP	BCD013117
(シリンダースクリュー1本入) (連結冠用)	

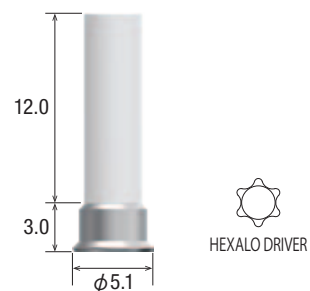

シリンダースクリュー

スプリントヒーリングキャップ、またはゴールドシリンダー、テンポラリーシリンダーで製作された補綴物をスプリントアバットメントに固定します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CYLINDER SCR	BCD013124

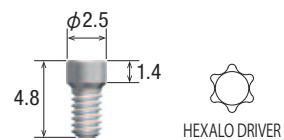


スプリントアバットメント用トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ（オーブントレー用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
16.0(S)	21.0(L)	FTL-SP T COP-RP-ST	BCD013325

(単冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

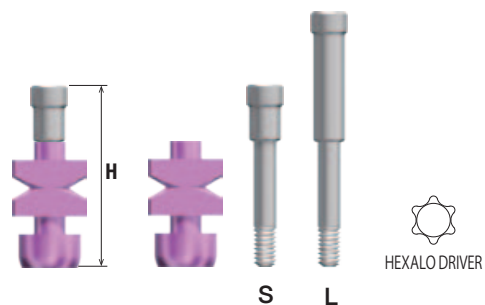


スプリントアバットメント用トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ（オーブントレー用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
16.0(S)	21.0(L)	FTL-SP T COP-RP-R	BCD013326

(連結冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

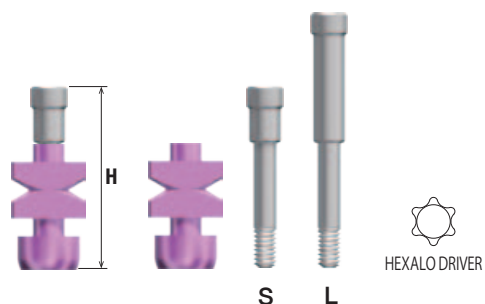


スプリントアバットメント用インプレッションポスト ST

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP IMP PST-RP-ST	BCD013290

（単冠用）

（スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入）
（インプレッションドライバーを使用）

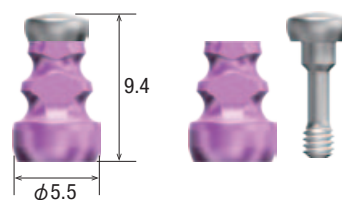


スプリントアバットメント用インプレッションポスト R

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP IMP PST-RP-R	BCD013291

（連結冠用）


（スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入）
（インプレッションドライバーを使用）

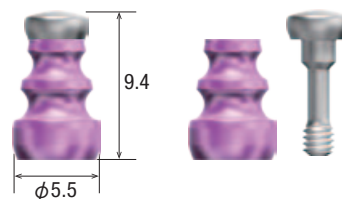

インプレッションドライバー

インプレッションポスト用スクリューの締め込み/除去に使用します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
F-IMPRESSION DRIVER	BCDI11315

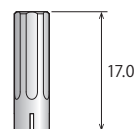

スプリントアバットメント用スキャンボディ

デジタル印象採得用パーツ（スプリントアバットメント用）


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP SCANBODY-RP	BCD013305

（シリンダースクリュー別売）



ヒーリングアバットメント

歯槽粘膜の治癒をはかります。

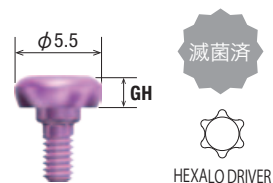

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.5	FTL-HEAL AB-1.5-RP	BCD013010
2.0	FTL-HEAL AB-2.0-RP	BCD013011
3.0	FTL-HEAL AB-3.0-RP	BCD013012
4.5	FTL-HEAL AB-4.5-RP	BCD013013



テンポラリーアバットメント ST


レジンを築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

商品名	商品コード
FTL-TEMP AB-ST-RP	BCD013060

(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)

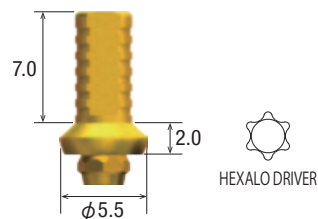

テンポラリーアバットメント R


レジンを築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

商品名	商品コード
FTL-TEMP AB-R-RP	BCD013061

(アバットメントスクリュー1本入)

(連結冠用)

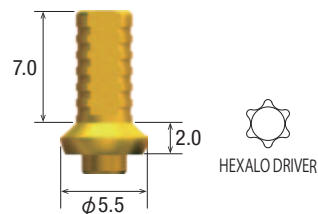


アバットメント、上部構造、印象パーツ

チタンベースアバットメント ST

CAD/CAMと連携し、ジルコニアアバットメントを製作します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-TI BASE AB-ST-RP	BCD013500

(アバットメントスクリュー1本入)

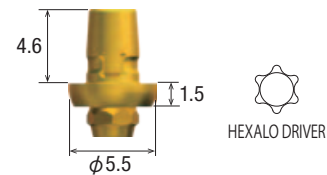


キャストオンアバットメント ST

自由度が高く、カスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CAST ON AB-ST-RP	BCD013110

(アバットメントスクリュー1本入)

(単冠用)

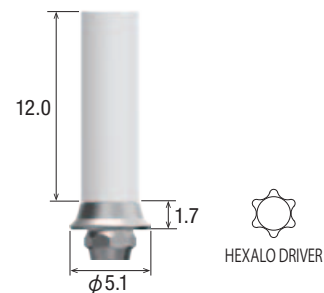


キャストオンアバットメント R

自由度が高く、カスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CAST ON AB-R-RP	BCD013111


(アバットメントスクリュー1本入)

(連結冠用)

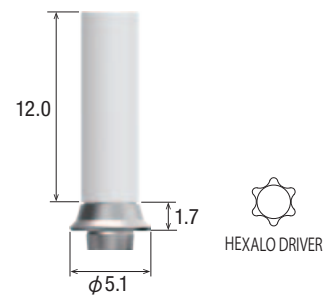

ダイレクトアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

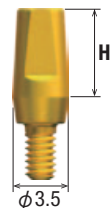

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用


単位:mm

H	商品名	商品コード
4.0	FTL-DIRECT AB-S-RP	BCD013030
5.5	FTL-DIRECT AB-M-RP	BCD013031
7.0	FTL-DIRECT AB-L-RP	BCD013032



ポストアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

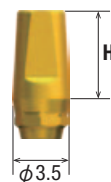

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
4.0	FTL-POST AB-S-RP	BCD013040
5.5	FTL-POST AB-M-RP	BCD013041
7.0	FTL-POST AB-L-RP	BCD013042



(アバットメントスクリュー1本入)


アングルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
ポスト部の傾斜はインプラント体OCTAの角に位置します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-ANGLE AB-RP	BCD013050

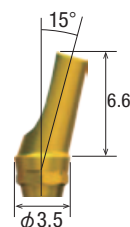


(アングルアバットメントスクリュー1本入)

アバットメント、上部構造、印象パーツ

アバットメントスクリュー

FINESIA TL用上部構造パーツ用のスクリューです。(スプリントアバットメントを除く)


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-AB SCR	BCD013080

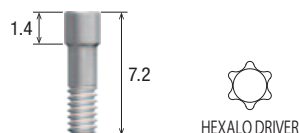

アングルアバットメントスクリュー


FINESIA TL用上部構造パーツ用のスクリューです。(アングルアバットメント用)

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-ANGLE AB SCR	BCD013081

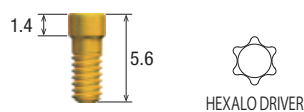

ボールアバットメント

インプラント体に装着して、ボールアタッチメント式オーバーデンチャーを製作します。
フィメールは弊社指定のダルボプラス (P21) をご使用ください。

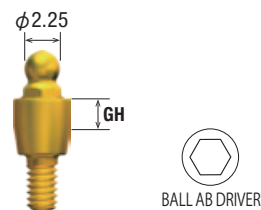

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm		
GH	商品名	商品コード
1.0	FTL-BALL AB-1.0-RP	BCD013091
2.0	FTL-BALL AB-2.0-RP	BCD013092
3.0	FTL-BALL AB-3.0-RP	BCD013093




トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm			
H	H	商品名	商品コード
13.0(S)	21.5(L)	FTL-T COP-RP-ST	BCD013280

（トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入）

（単冠用）

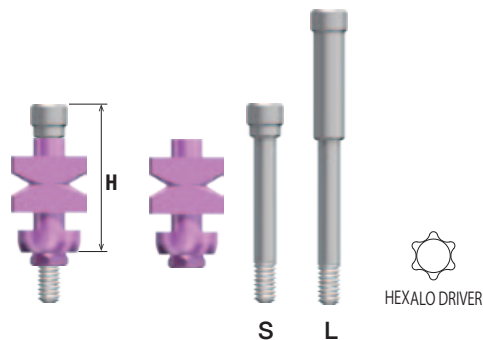


トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm			
H	H	商品名	商品コード
13.0(S)	21.5(L)	FTL-T COP-RP-R	BCD013281

（トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入）

（連結冠用）

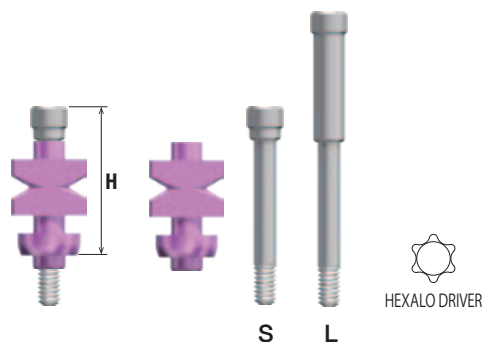


インプレッションポスト

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-IMP POST-RP	BCD013320

（インプレッションポスト用スクリュー1本入）

（インプレッションキャップ（別売）を組合わせてご使用ください）

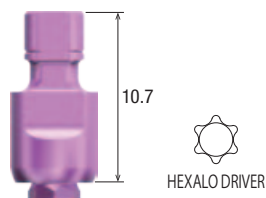

インプレッションキャップ

(インプレッションポスト用印象キャップ)

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

商品名	商品コード
F-IMPRESSION CAP	BCD011535


(4個入)

(単回使用)



ダイレクトインプレッションキャップ

ダイレクトアバットメント用の印象キャップです。

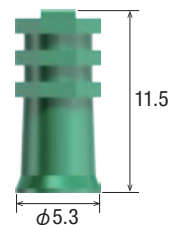

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-D IMP CAP-RP-S	BCD013380
FTL-D IMP CAP-RP-M	BCD013381
FTL-D IMP CAP-RP-L	BCD013382



(4個入)

スキャンボディ


デジタル印象採得用パーツ

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-SCANBODY-RP	BCD013300

(アバットメントスクリュー別売)

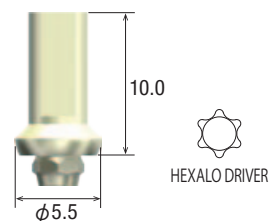

技工部品

スプリントアバットメント用アナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

商品名	商品コード
FTL-SP ANALOG-RP	BCD013210




スプリントアバットメント用ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。

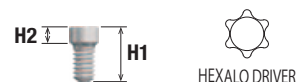


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm

H1	H2	商品名	商品コード
4.8	1.4	FTL-SP LAB SCR1.4L	BCD013250
12.7	9.3	FTL-SP LAB SCR9.3L	BCD013251
17.7	14.3	FTL-SP LAB SCR14.3L	BCD013252
22.7	19.3	FTL-SP LAB SCR19.3L	BCD013253

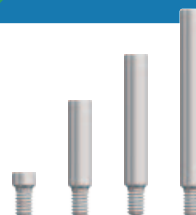

ダイレクトアバットメント用アナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

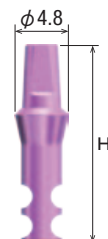

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm


H	商品名	商品コード
16.0	FTL-D-ANALOG-RP-S	BCD013220
17.5	FTL-D-ANALOG-RP-M	BCD013221
19.0	FTL-D-ANALOG-RP-L	BCD013222



アナログ RP


補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-ANALOG-RP-L	BCD013202

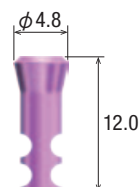


ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。

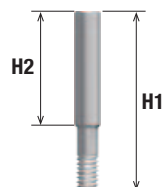


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm			
H1	H2	商品名	商品コード
7.2	1.4	FTL-LAB SCR 1.4L	BCD013230
15.8	10.0	FTL-LAB SCR 10L	BCD013231
20.8	15.0	FTL-LAB SCR 15L	BCD013232
25.8	20.0	FTL-LAB SCR 20L	BCD013233

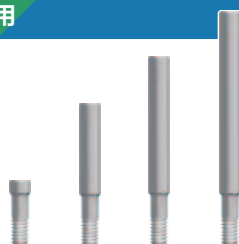


アングルラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。(アングルアバットメント用)

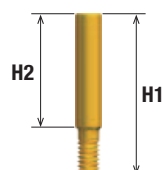


$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm			
H1	H2	商品名	商品コード
5.6	1.4	FTL-AN LAB SCR 1.4L	BCD013240
14.2	10.0	FTL-AN LAB SCR 10L	BCD013241
19.2	15.0	FTL-AN LAB SCR 15L	BCD013242
24.2	20.0	FTL-AN LAB SCR 20L	BCD013243

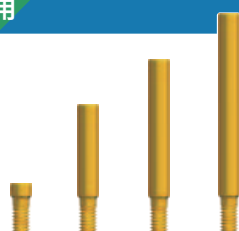

ボールアバットメントアナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
F-BALL AB ANALOG	BCD011415

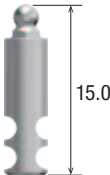

ダルボ関連パーツ

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ (RP) ・ $\phi 4.7 / 5.2$ (WP) 共通		
商品名	商品コード	
ダルボプラス フィメール DALBO-PL FEMALE	BCD015000	
ダルボプラス フィメールハウジング DALBO-PL FM HS	BCD015001	
ダルボプラス エリプティックフィメール DALBO-PL EL FEMALE	BCD015002	
ダルボプラス エリプティックフィメールハウジング DALBO-PL EL FM HS	BCD015003	
ラメラテンションインサート LAMELLAE INSERT E	BCD015004	
ラメラテンションインサートチューニングソフト LAMELLAE INSERT SF	BCD015005	
ラメラテンションインサートチューニング LAMELLAE INSERT TN	BCD015006	
ダルボディプリケーションエイド DUPLICATION AID	BCD015007	
スペーサーディスク SPACER DISC	BCD015008	
ヒーティングロッド HEATING ROD	BCD111400	
スクリュードライバ/アクチベーター LM DRIVER/ACTIVATOR	BCD111401	
フィメールゲージ FEMALE GAUGE	BCD015009	

製造販売元 大信貿易株式会社

RP

WP


インスツルメント

FINESIA TL

ロケータ関連

FINESIA TL LOCATOR アバットメント


インプラント体に装着して、LOCATOR アタッチメント式のオーバーデンチャーを製作します。

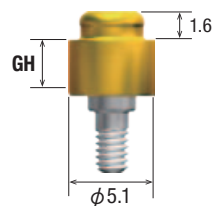

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用


単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FTL-LOC AB-1.0-RP	BCD015070
2.0	FTL-LOC AB-2.0-RP	BCD015071
3.0	FTL-LOC AB-3.0-RP	BCD015072

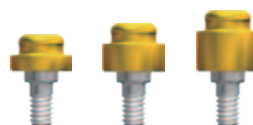

LOCATOR アバットメントの選択

プローブ等で歯肉の厚みを計測し、アバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。アバットメントの上部 1.5mm が歯肉縁上にできるようにアバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。

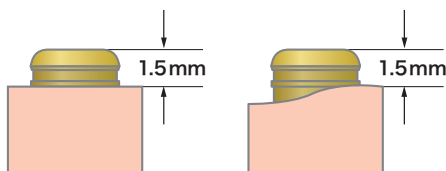

LOCATOR リプレイスメントメールセット

LOCATOR EXTリプレイスメントメールセット

インプラント間角度が $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ の傾斜時に使用するリプレイスメントメールが同梱されています。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC EXT MALE SET 2P	BCD015101

(各2個入)



LOCATOR
デンチャーキャップ



LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレイスメントメール



LOCATOR
ブロックアウトスペーサー



LOCATOR リプレイスメントメール

LOCATOR リプレイスメントメールセット

インプラント間角度が $0^{\circ} \sim 10^{\circ}$ の傾斜時に使用するリプレイスメントメールが同梱されています。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC MALE SET 2P	BCD015103

(各2個入)



LOCATOR
デンチャーキャップ



LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレイスメントメール



LOCATOR
ブロックアウトスペーサー



LOCATOR リプレイスメントメール

LOCATOR リプレースメントメール (単品)

LOCATOR デンチャーキャップと組み合わせ、義歯内に取り込みます。
LOCATOR リプレースメントメールは適応角度および維持力によって色分けされています。

LOCATOR リプレースメントメールグレー

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力 (目安): 0kg	商品名	商品コード
	LOC MALE GRAY 4P	BCD015121



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールレッド

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力 (目安): 0.45kg	商品名	商品コード
	LOC MALE RED 4P	BCD015123



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールオレンジ

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力 (目安): 0.91kg	商品名	商品コード
	LOC MALE ORANGE 4P	BCD015125



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールグリーン

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力 (目安): 1.82kg	商品名	商品コード
	LOC MALE GREEN 4P	BCD015127



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールブルー

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力(目安): 0.68kg

商品名
LOC MALE BLUE 4P

商品コード
BCD015129



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールピンク

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力(目安): 1.36kg

商品名
LOC MALE PINK 4P

商品コード
BCD015131



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールクリア

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

維持力(目安): 2.27kg

商品名
LOC MALE CLEAR 4P

商品コード
BCD015133



(4個入)

LOCATOR ブラックプロセッシングリプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール装着までの間 LOCATOR デンチャーキャップに装着し、LOCATOR デンチャーキャップの内部を保護します。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BLK PR MALE 4P	BCD015107



(4個入)

LOCATOR ブロックアウトスペーサー

LOCATOR アバットメントに装着し、義歯取り込み時に LOCATOR デンチャーキャップ内部にレジンが入るのを防ぎます。

$\phi 3.7 / 4.2 / 4.7$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BO SPACER 20P	BCD015108



(20個入)

Tissue Level

WP

Wide Platform

φ4.7 φ5.2

インプラント（マウントフリータイプ）



TL HA TP WP MF

Tapered type

Diameter		$\phi 4.7$			単位:mm
Length	HA	H1	商品名	商品コード	
8.0	6.0		FTL-HA47-8TP25WP-MF	BCD013695	
10.0	8.0	2.5	FTL-HA47-10TP25WP-MF	BCD013696	
12.0	10.0		FTL-HA47-12TP25WP-MF	BCD013697	


Diameter		$\phi 5.2$			単位:mm
Length	HA	H1	商品名	商品コード	
8.0	6.0		FTL-HA52-8TP25WP-MF	BCD013701	
10.0	8.0	2.5	FTL-HA52-10TP25WP-MF	BCD013702	
12.0	10.0		FTL-HA52-12TP25WP-MF	BCD013703	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

(ヒーリングAB1.5mm 1個同梱)



表面処理 **HA**
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

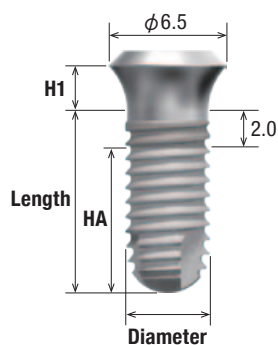

TL HA ST WP MF

Straight type

Diameter $\phi 4.7$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
6.0	4.0	2.5	FTL-HA47-6ST25WP-MF	BCD013657
8.0	6.0		FTL-HA47-8ST25WP-MF	BCD013658
10.0	8.0		FTL-HA47-10ST25WP-MF	BCD013659
12.0	10.0		FTL-HA47-12ST25WP-MF	BCD013660

Diameter $\phi 5.2$ 単位:mm				
Length	HA	H1	商品名	商品コード
6.0	4.0	2.5	FTL-HA52-6ST25WP-MF	BCD013665
8.0	6.0		FTL-HA52-8ST25WP-MF	BCD013666
10.0	8.0		FTL-HA52-10ST25WP-MF	BCD013667
12.0	10.0		FTL-HA52-12ST25WP-MF	BCD013668

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

(ヒーリングAB1.5mm 1個同梱)




表面処理 HA
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

RP

WP

インスツルメント

FINESIA TL

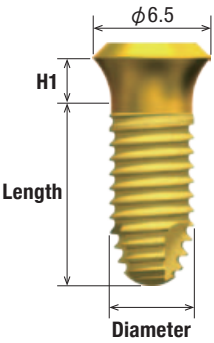

TL AO TP WP MF

Tapered type

Diameter		$\phi 4.7$		単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード	
8.0	2.5	FTL-A047-8TP25WP-MF	BCD013617	
10.0		FTL-A047-10TP25WP-MF	BCD013618	
12.0		FTL-A047-12TP25WP-MF	BCD013619	

Diameter		$\phi 5.2$		単位:mm
Length	H1	商品名	商品コード	
8.0	2.5	FTL-A052-8TP25WP-MF	BCD013623	
10.0		FTL-A052-10TP25WP-MF	BCD013624	
12.0		FTL-A052-12TP25WP-MF	BCD013625	


Diameter = (直径) Length = (骨内長)

(ヒーリングAB1.5mm 1個同梱)



表面処理 **AO**
Anode Oxidization (陽極酸化)

インプラント (マウントフリータイプ)

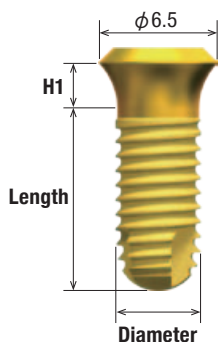

TL A0 ST WP MF

Straight type

Diameter $\phi 4.7$ 単位: mm			
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	2.5	FTL-A047-6ST25WP-MF	BCD013579
8.0		FTL-A047-8ST25WP-MF	BCD013580
10.0		FTL-A047-10ST25WP-MF	BCD013581
12.0		FTL-A047-12ST25WP-MF	BCD013582

Diameter $\phi 5.2$ 単位: mm			
Length	H1	商品名	商品コード
6.0	2.5	FTL-A052-6ST25WP-MF	BCD013587
8.0		FTL-A052-8ST25WP-MF	BCD013588
10.0		FTL-A052-10ST25WP-MF	BCD013589
12.0		FTL-A052-12ST25WP-MF	BCD013590

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

(ヒーリングAB1.5mm 1個同梱)



表面処理 **A0**
Anode Oxidization (陽極酸化)

RP

WP

インスツルメント

FINESIA TL

キャップ

カバースクリュー

免荷期間中のインプラント体を封鎖して保護します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-COVER SCR-WP	BCD013001	




六角ドライバー

アバットメント、上部構造、印象パーツ

スプリントアバットメント

スクリュー固定式補綴物に対応する上部構造パーツです。


$\phi 4.7 / 5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP AB-WP	BCD013115

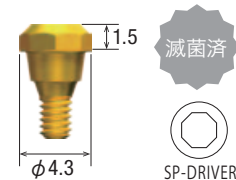

スプリントヒーリングキャップ

最終補綴物が製作されるまでの間、スプリントアバットメントに装着します。

$\phi 4.7 / 5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP HEAL CAP-WP	BCD013126

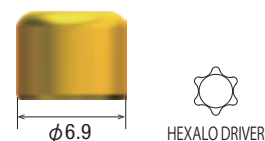


(シリンダースクリュー1本入)

テンポラリーシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 4.7 / 5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-T CYLINDER-ST-WP	BCD013122

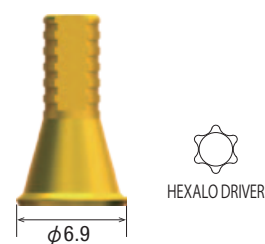


(シリンダースクリュー1本入)

(単冠用)

テンポラリーシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、暫間補綴物を製作します。

$\phi 4.7 / 5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-T CYLINDER-R-WP	BCD013123

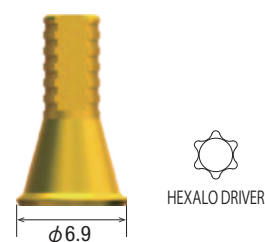


(シリンダースクリュー1本入)

(連結冠用)

ゴールドシリンダー ST

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリュー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-G CYLINDER-ST-WP	BCD013118
(シリンダースクリュー1本入) (単冠用)	

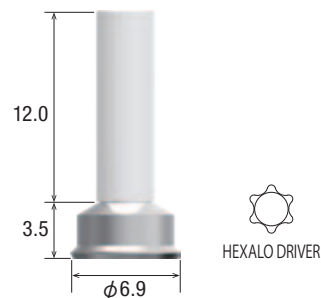

ゴールドシリンダー R

スプリントアバットメントと組み合わせ、スクリュー固定式の補綴物を製作します。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-G CYLINDER-R-WP	BCD013119
(シリンダースクリュー1本入) (連結冠用)	

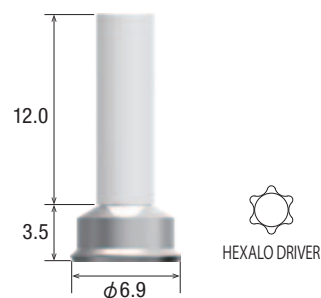

シリンダースクリュー

スプリントヒーリングキャップ、またはゴールドシリンダー、テンポラリーシリンダーで製作された補綴物をスプリントアバットメントに固定します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CYLINDER SCR	BCD013124

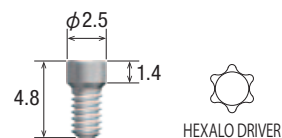


スプリントアバットメント用トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
16.0(S)	21.0(L)	FTL-SP T COP-WP-ST	BCD013327

(単冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

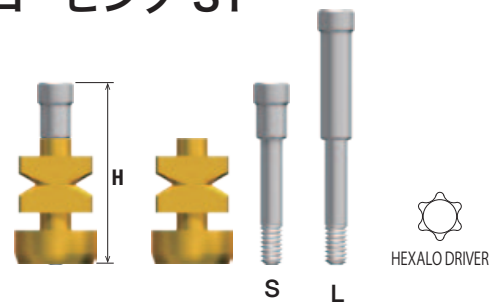


スプリントアバットメント用トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
16.0(S)	21.0(L)	FTL-SP T COP-WP-R	BCD013328

(連結冠用)

(スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入)

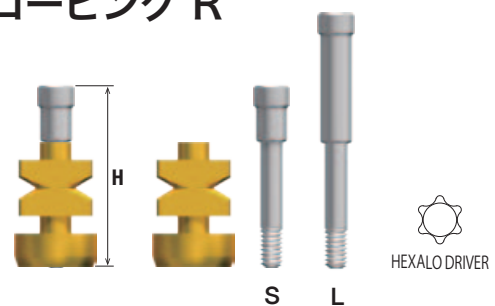


スプリントアバットメント用インプレッションポスト ST

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP IMP PST-WP-ST	BCD013292

(単冠用)

(スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入)
(インプレッションドライバーを使用)

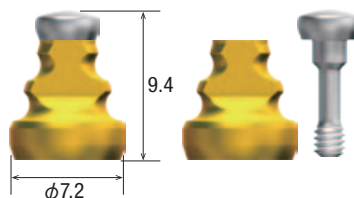


スプリントアバットメント用インプレッションポスト R

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP IMP PST-WP-R	BCD013293

(連結冠用)


(スプリントアバットメント用インプレッションポスト用スクリュー1本入)
(インプレッションドライバーを使用)

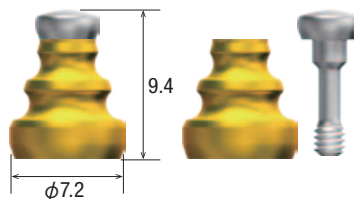

インプレッションドライバー

インプレッションポスト用スクリューの締め込み/除去に使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
F-IMPRESSION DRIVER	BCDI11315

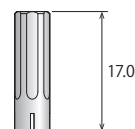


スプリントアバットメント用スキャンボディ

デジタル印象採得用パーツ（スプリントアバットメント用）


$\phi 4.7 / 5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-SP SCANBODY-WP	BCD013306

（シリンダースクリュー別売）

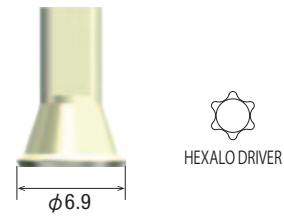

ヒーリングアバットメント

歯槽粘膜の治癒をはかります。

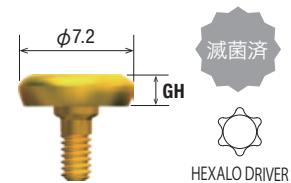

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.5	FTL-HEAL AB-1.5-WP	BCD013014
2.0	FTL-HEAL AB-2.0-WP	BCD013015
3.0	FTL-HEAL AB-3.0-WP	BCD013016
4.5	FTL-HEAL AB-4.5-WP	BCD013017



テンポラリーアバットメント ST

レジンで築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-TEMP AB-ST-WP	BCD013062

(アバットメントスクルー1本入)

(単冠用)

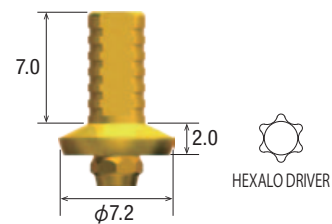

テンポラリーアバットメント R

レジンで築盛してプロビジョナルクラウンを製作します。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-TEMP AB-R-WP	BCD013063

(アバットメントスクルー1本入)

(連結冠用)

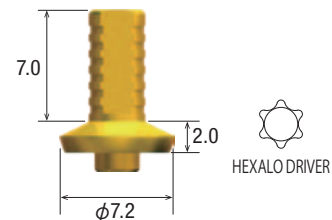


アバットメント、上部構造、印象パーツ

チタンベースアバットメント ST

CAD/CAMと連携し、ジルコニアアバットメントを製作します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-TI BASE AB-ST-WP	BCD013501

(アバットメントスクリュー1本入)

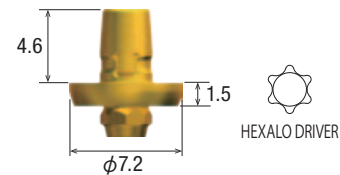


キャストオンアバットメント ST

自由度が高く、カスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CAST ON AB-ST-WP	BCD013112

(アバットメントスクリュー1本入) (単冠用)

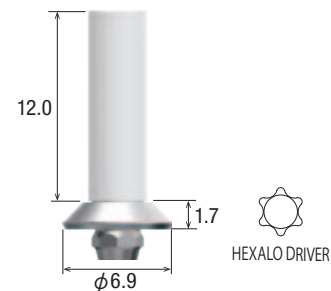


キャストオンアバットメント R

自由度が高く、カスタムアバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作できる適応範囲の広いアバットメントです。


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-CAST ON AB-R-WP	BCD013113

(アバットメントスクリュー1本入) (連結冠用)

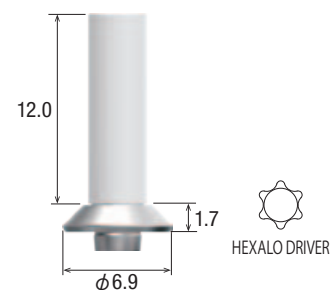

ダイレクトアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

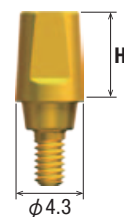

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用


単位:mm

H	商品名	商品コード
4.0	FTL-DIRECT AB-S-WP	BCD013033
5.5	FTL-DIRECT AB-M-WP	BCD013034
7.0	FTL-DIRECT AB-L-WP	BCD013035



ポストアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。

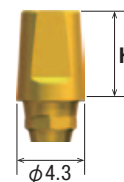

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

H	商品名	商品コード
4.0	FTL-POST AB-S-WP	BCD013043
5.5	FTL-POST AB-M-WP	BCD013044
7.0	FTL-POST AB-L-WP	BCD013045



(アバットメントスクリュー1本入)


アングルアバットメント

インプラント体に装着して補綴物を直接セメント合着します。
ポスト部の傾斜はインプラント体OCTAの角に位置します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-ANGLE AB-WP	BCD013051

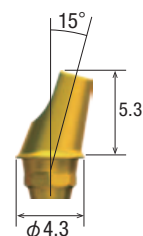


(アングルアバットメントスクリュー1本入)

アバットメント、上部構造、印象パーツ

アバットメントスクリュー

FINESIA TL用上部構造パーツ用のスクリューです。(スプリントアバットメントを除く)


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-AB SCR	BCD013080

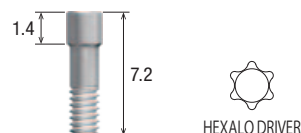

アングルアバットメントスクリュー


FINESIA TL用上部構造パーツ用のスクリューです。(アングルアバットメント用)

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm	
商品名	商品コード
FTL-ANGLE AB SCR	BCD013081

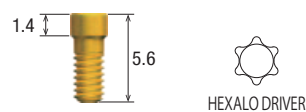

ボールアバットメント

インプラント体に装着して、ボールアタッチメント式
オーバーデンチャーを製作します。
フィメールは弊社指定のダルボプラス (P47) をご使用ください。

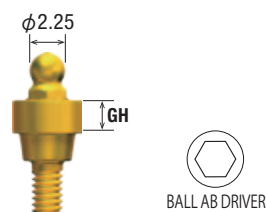

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用 単位:mm		
GH	商品名	商品コード
1.0	FTL-BALL AB-1.0-WP	BCD013097
2.0	FTL-BALL AB-2.0-WP	BCD013098
3.0	FTL-BALL AB-3.0-WP	BCD013099




トランスファーコーピング ST

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
13.0(S)	21.5(L)	FTL-T COP-WP-ST	BCD013282

（トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入）

（単冠用）

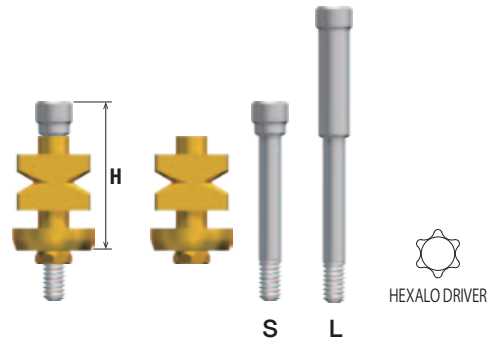


トランスファーコーピング R

間接印象採得用パーツ（オープントレー用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
H	H	商品名	商品コード
13.0(S)	21.5(L)	FTL-T COP-WP-R	BCD013283

（トランスファーコーピング用スクリュー S, L 各1本入）

（連結冠用）

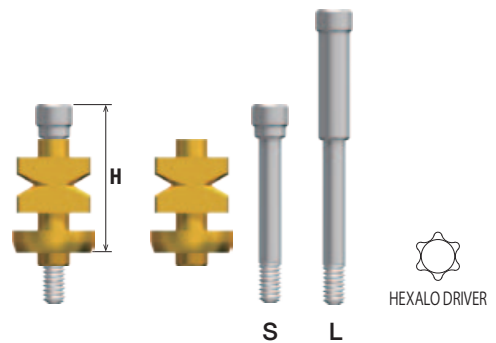


インプレッションポスト

間接印象採得用パーツ（クローズドトレイ用）

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm	
商品名		商品コード	
FTL-IMP POST-WP		BCD013321	

（インプレッションポスト用スクリュー1本入）

（インプレッションキャップ（別売）を組合わせてご使用ください）

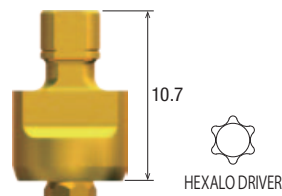

インプレッションキャップ

(インプレッションポスト用印象キャップ)

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
F-IMPRESSION CAP	BCD011535


(4個入)

(単回使用)



ダイレクトインプレッションキャップ

ダイレクトアバットメント用の印象キャップです。

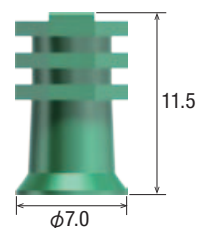

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-D IMP CAP-WP-S	BCD013383
FTL-D IMP CAP-WP-M	BCD013384
FTL-D IMP CAP-WP-L	BCD013385

(4個入)



スキャンボディ


デジタル印象採得用パーツ

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm

商品名	商品コード
FTL-SCANBODY-WP	BCD013301

(アバットメントスクリュー別売)

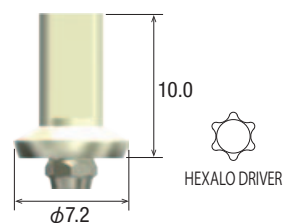

技工部品


スプリントアバットメント用アナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用


単位:mm

商品名	商品コード
FTL-SP ANALOG-WP	BCD013211

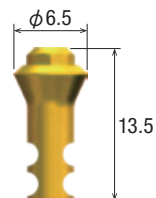

スプリントアバットメント用ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。

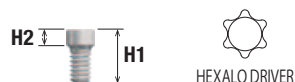

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用


単位:mm

H1	H2	商品名	商品コード
4.8	1.4	FTL-SP LAB SCR1.4L	BCD013250
12.7	9.3	FTL-SP LAB SCR9.3L	BCD013251
17.7	14.3	FTL-SP LAB SCR14.3L	BCD013252
22.7	19.3	FTL-SP LAB SCR19.3L	BCD013253



ダイレクトアバットメント用アナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

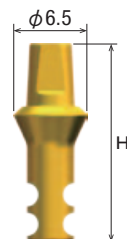

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

単位:mm


H	商品名	商品コード
16.0	FTL-D-ANALOG-WP-S	BCD013223
17.5	FTL-D-ANALOG-WP-M	BCD013224
19.0	FTL-D-ANALOG-WP-L	BCD013225



アナログ WP


補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
FTL-ANALOG-WP-L	BCD013203	

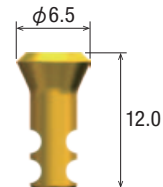


ラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。

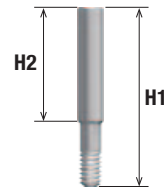


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用				単位:mm
H1	H2	商品名	商品コード	
7.2	1.4	FTL-LAB SCR 1.4L	BCD013230	
15.8	10.0	FTL-LAB SCR 10L	BCD013231	
20.8	15.0	FTL-LAB SCR 15L	BCD013232	
25.8	20.0	FTL-LAB SCR 20L	BCD013233	

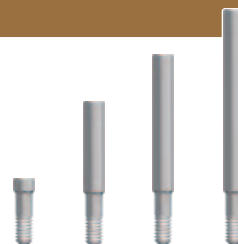


アングルラボスクリュー

補綴物をアナログ模型上で製作する際に使用する
技工作業用スクリューです。(アングルアバットメント用)

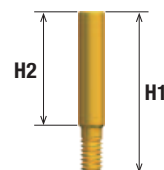


$\phi 4.7/5.2$ インプラント用				単位:mm
H1	H2	商品名	商品コード	
5.6	1.4	FTL-AN LAB SCR 1.4L	BCD013240	
14.2	10.0	FTL-AN LAB SCR 10L	BCD013241	
19.2	15.0	FTL-AN LAB SCR 15L	BCD013242	
24.2	20.0	FTL-AN LAB SCR 20L	BCD013243	

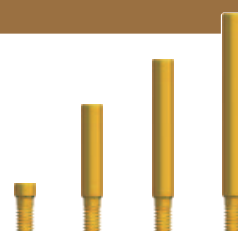

ボールアバットメントアナログ

補綴物を製作するため作業模型でダミーとして使用します。

$\phi 4.7 / 5.2$ インプラント用		単位:mm
商品名	商品コード	
F-BALL AB ANALOG	BCD011415	

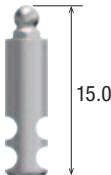

ダルボ関連パーツ

$\phi 3.7/4.2/4.7$ (RP) ・ $\phi 4.7/5.2$ (WP) 共通

商品名	商品コード	
ダルボプラス フィメール DALBO-PL FEMALE	BCD015000	
ダルボプラス フィメールハウジング DALBO-PL FM HS	BCD015001	
ダルボプラス エリプティックフィメール DALBO-PL EL FEMALE	BCD015002	
ダルボプラス エリプティックフィメールハウジング DALBO-PL EL FM HS	BCD015003	
ラメラテンションインサート LAMELLAE INSERT E	BCD015004	
ラメラテンションインサートチューニングソフト LAMELLAE INSERT SF	BCD015005	
ラメラテンションインサートチューニング LAMELLAE INSERT TN	BCD015006	
ダルボディプリケーションエイド DUPLICATION AID	BCD015007	
スペーサーディスク SPACER DISC	BCD015008	
ヒーティングロッド HEATING ROD	BCDI11400	
スクリュードライバ/アクチベーター LM DRIVER/ACTIVATOR	BCDI11401	
フィメールゲージ FEMALE GAUGE	BCD015009	

製造販売元 大信貿易株式会社

RP

WP


インスツルメント

FINESIA TL

ロケータ関連

FINESIA TL LOCATOR アバットメント


インプラント体に装着して、LOCATOR アタッチメント式の
オーバーデンチャーを製作します。

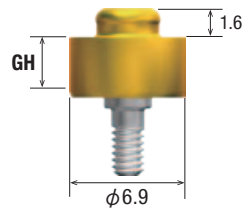

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用


単位:mm

GH	商品名	商品コード
1.0	FTL-LOC AB-1.0-WP	BCD015080
2.0	FTL-LOC AB-2.0-WP	BCD015081
3.0	FTL-LOC AB-3.0-WP	BCD015082

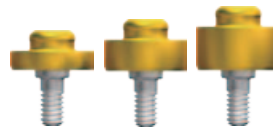

LOCATOR アバットメントの選択

プローブ等で歯肉の厚みを計測し、アバットメントのカフ高さ (GH) を選択します。
アバットメントの上部 1.5mm が歯肉縁上にできるようにアバットメントの
カフ高さ (GH) を選択します。

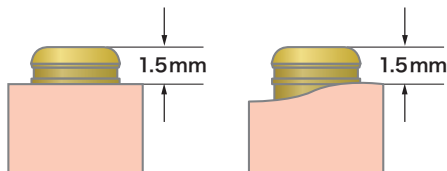

LOCATOR リプレイスメントメールセット

LOCATOR EXTリプレイスメントメールセット

インプラント間角度が 10° ~ 20° の傾斜時に使用するリプレイスメントメールが同梱されています。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC EXT MALE SET 2P	BCD015101

(各2個入)


LOCATOR
デンチャーキャップ


LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレイスメントメール


LOCATOR
ブロックアウトスペーサー


LOCATOR リプレイスメントメール

LOCATOR リプレイスメントメールセット

インプラント間角度が 0° ~ 10° の傾斜時に使用するリプレイスメントメールが同梱されています。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC MALE SET 2P	BCD015103

(各2個入)


LOCATOR
デンチャーキャップ


LOCATOR
ブラックプロセッシング
リプレイスメントメール


LOCATOR
ブロックアウトスペーサー


LOCATOR リプレイスメントメール

LOCATOR リプレースメントメール (単品)

LOCATOR デンチャーキャップと組み合わせ、義歯内に取り込みます。

LOCATOR リプレースメントメールは適応角度および維持力によって色分けされています。

LOCATOR リプレースメントメールグレー

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0kg

商品名	商品コード
LOC MALE GRAY 4P	BCD015121



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールレッド

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0.45kg

商品名	商品コード
LOC MALE RED 4P	BCD015123



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールオレンジ

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0.91kg

商品名	商品コード
LOC MALE ORANGE 4P	BCD015125



(4個入)

LOCATOR リプレースメントメールグリーン

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 1.82kg

商品名	商品コード
LOC MALE GREEN 4P	BCD015127



(4個入)

ロケーター関連

LOCATOR リプレイスメントメールブルー

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 0.68kg

商品名
LOC MALE BLUE 4P商品コード
BCD015129

(4個入)

LOCATOR リプレイスメントメールピンク

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 1.36kg

商品名
LOC MALE PINK 4P商品コード
BCD015131

(4個入)

LOCATOR リプレイスメントメールクリア

 $\phi 4.7/5.2$ インプラント用

維持力(目安): 2.27kg

商品名
LOC MALE CLEAR 4P商品コード
BCD015133

(4個入)

LOCATOR ブラックプロセッシングリプレースメントメール

LOCATOR リプレースメントメール装着までの間 LOCATOR デンチャーキャップに装着し、LOCATOR デンチャーキャップの内部を保護します。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BLK PR MALE 4P	BCD015107



(4個入)

LOCATOR ブロックアウトスペーサー

LOCATOR アバットメントに装着し、義歯取り込み時に LOCATOR デンチャーキャップ内部にレジンが入るのを防ぎます。

$\phi 4.7/5.2$ インプラント用

商品名	商品コード
LOC BO SPACER 20P	BCD015108



(20個入)

FINESIA

インスツルメント


インスツルメント

マーキングバー

インプラント体の植立予定位置にマーキングします。

商品名	商品コード
MARKING BUR-M	BCDI11001

単位:mm

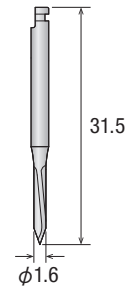


パイロットドリル 16

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0		PILOT DRL16-S	BCDI11002
38.5	22.0	●	PILOT DRL16-M	BCDI11003

単位:mm

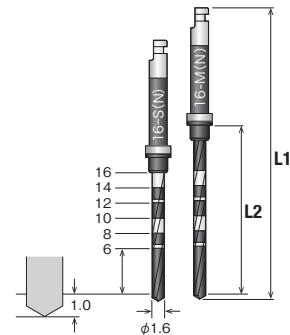


パイロットドリル ストッパー 16

パイロットドリル 16 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER16-5	BCDI11010
6.0		PD STOPPER16-6	BCDI11011
7.0		PD STOPPER16-7	BCDI11012
8.0		PD STOPPER16-8	BCDI11013
9.0	●	PD STOPPER16-9	BCDI11014
10.0		PD STOPPER16-10	BCDI11015
11.0		PD STOPPER16-11	BCDI11016
12.0		PD STOPPER16-12	BCDI11017

(1個入)

単位:mm

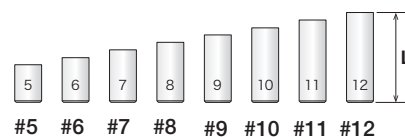


トライアルピン

形成したパイロットホールの深さ及び方向を確認します。

L	商品名	商品コード
18.8	TRIAL PIN16-S	BCDI11140
24.8	TRIAL PIN16-M	BCDI11141

単位:mm

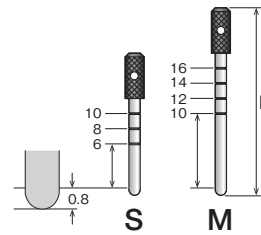


パイロットドリル 22

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0	●	PILOT DRL22-S	BCDI11004
38.5	22.0	●	PILOT DRL22-M	BCDI11005

単位:mm

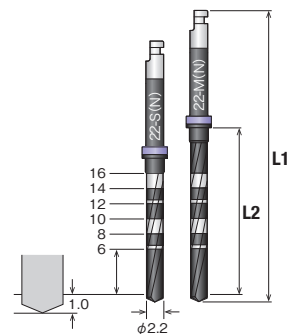


パイロットドリル ストッパー 22

パイロットドリル 22 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER22-5	BCDI11018
6.0		PD STOPPER22-6	BCDI11019
7.0		PD STOPPER22-7	BCDI11020
8.0	●	PD STOPPER22-8	BCDI11021
9.0		PD STOPPER22-9	BCDI11022
10.0		PD STOPPER22-10	BCDI11023
11.0		PD STOPPER22-11	BCDI11024
12.0		PD STOPPER22-12	BCDI11025

単位:mm

(1個入)


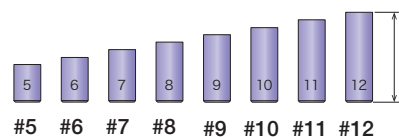


ファイナルドリル TP

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7		FINAL DRL30-TP-S FINAL DRL30-TP-M	BCDI11030 BCDI11031
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1		FINAL DRL34-TP-S FINAL DRL34-TP-M	BCDI11034 BCDI11035
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4		FINAL DRL37-TP-S FINAL DRL37-TP-M	BCDI11036 BCDI11037
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9		FINAL DRL42-TP-S FINAL DRL42-TP-M	BCDI11038 BCDI11039
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4		FINAL DRL47-TP-S FINAL DRL47-TP-M	BCDI11040 BCDI11041
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.9		FINAL DRL52-TP-S FINAL DRL52-TP-M	BCDI11042 BCDI11043

単位:mm

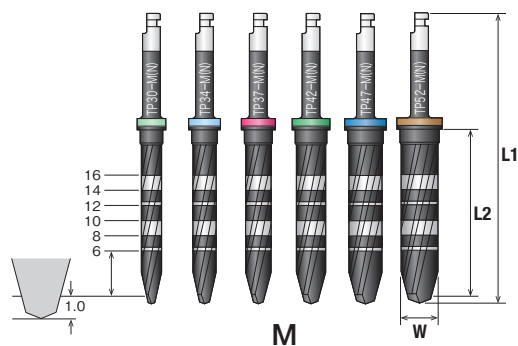
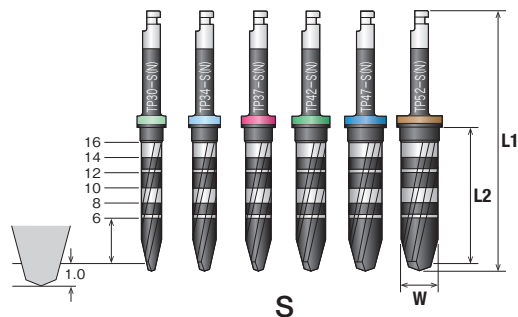


ファイナルドリル ST

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7		FINAL DRL30-ST-S FINAL DRL30-ST-M	BCDI11050 BCDI11051
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1		FINAL DRL34-ST-S FINAL DRL34-ST-M	BCDI11054 BCDI11055
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4		FINAL DRL37-ST-S FINAL DRL37-ST-M	BCDI11056 BCDI11057
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9		FINAL DRL42-ST-S FINAL DRL42-ST-M	BCDI11058 BCDI11059
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4		FINAL DRL47-ST-S FINAL DRL47-ST-M	BCDI11060 BCDI11061
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.9		FINAL DRL52-ST-S FINAL DRL52-ST-M	BCDI11062 BCDI11063

単位:mm

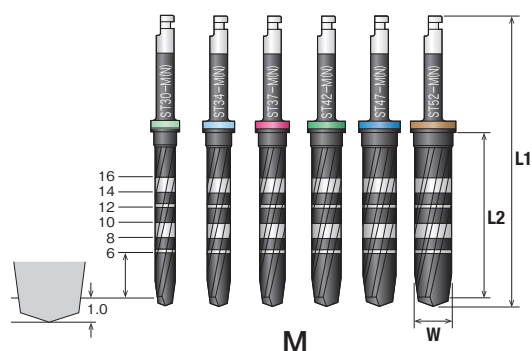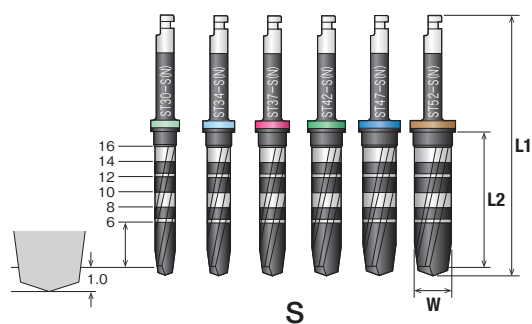







ファイナルドリル ストッパー

ファイナルドリルに装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		FD STOPPER30-5	BCDI11080
6.0		FD STOPPER30-6	BCDI11081
7.0		FD STOPPER30-7	BCDI11082
8.0		FD STOPPER30-8	BCDI11083
9.0		FD STOPPER30-9	BCDI11084
10.0		FD STOPPER30-10	BCDI11085
11.0		FD STOPPER30-11	BCDI11086
12.0		FD STOPPER30-12	BCDI11087
5.0		FD STOPPER34-5	BCDI11096
6.0		FD STOPPER34-6	BCDI11097
7.0		FD STOPPER34-7	BCDI11098
8.0		FD STOPPER34-8	BCDI11099
9.0		FD STOPPER34-9	BCDI11100
10.0		FD STOPPER34-10	BCDI11101
11.0		FD STOPPER34-11	BCDI11102
12.0		FD STOPPER34-12	BCDI11103
5.0		FD STOPPER37-5	BCDI11104
6.0		FD STOPPER37-6	BCDI11105
7.0		FD STOPPER37-7	BCDI11106
8.0		FD STOPPER37-8	BCDI11107
9.0		FD STOPPER37-9	BCDI11108
10.0		FD STOPPER37-10	BCDI11109
11.0		FD STOPPER37-11	BCDI11110
12.0		FD STOPPER37-12	BCDI11111
5.0		FD STOPPER42-5	BCDI11112
6.0		FD STOPPER42-6	BCDI11113
7.0		FD STOPPER42-7	BCDI11114
8.0		FD STOPPER42-8	BCDI11115
9.0		FD STOPPER42-9	BCDI11116
10.0		FD STOPPER42-10	BCDI11117
11.0		FD STOPPER42-11	BCDI11118
12.0		FD STOPPER42-12	BCDI11119
5.0		FD STOPPER47-5	BCDI11120
6.0		FD STOPPER47-6	BCDI11121
7.0		FD STOPPER47-7	BCDI11122
8.0		FD STOPPER47-8	BCDI11123
9.0		FD STOPPER47-9	BCDI11124
10.0		FD STOPPER47-10	BCDI11125
11.0		FD STOPPER47-11	BCDI11126
12.0		FD STOPPER47-12	BCDI11127
5.0		FD STOPPER52-5	BCDI11128
6.0		FD STOPPER52-6	BCDI11129
7.0		FD STOPPER52-7	BCDI11130
8.0		FD STOPPER52-8	BCDI11131
9.0		FD STOPPER52-9	BCDI11132
10.0		FD STOPPER52-10	BCDI11133
11.0		FD STOPPER52-11	BCDI11134
12.0		FD STOPPER52-12	BCDI11135

(1個入)

単位:mm

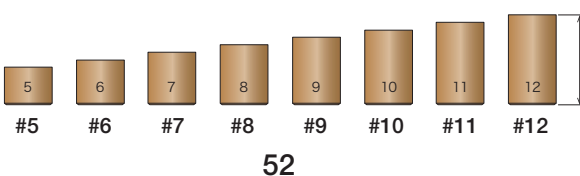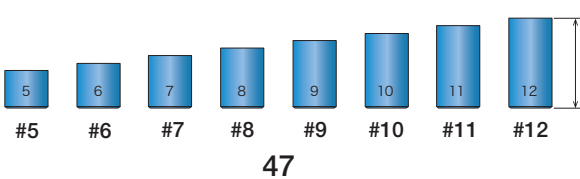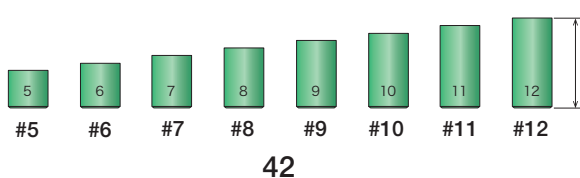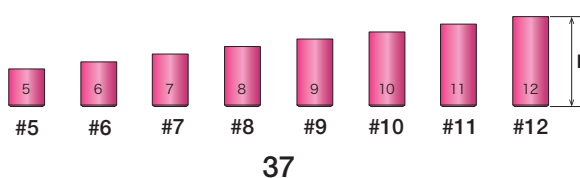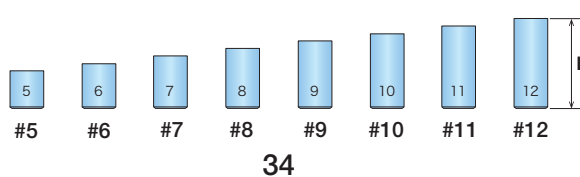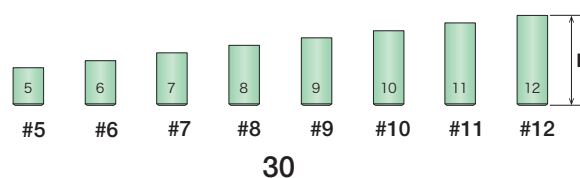


トライアルガイド TP

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
0.9	TRIAL GUIDE-TP-37	BCDI11153
	TRIAL GUIDE-TP-42	BCDI11154
	TRIAL GUIDE-TP-47	BCDI11155
	TRIAL GUIDE-TP-52	BCDI11156

単位:mm

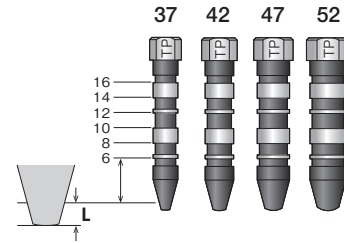


トライアルガイド ST

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
0.8	TRIAL GUIDE-ST-37	BCDI11163
	TRIAL GUIDE-ST-42	BCDI11164
	TRIAL GUIDE-ST-47	BCDI11165
	TRIAL GUIDE-ST-52	BCDI11166

単位:mm

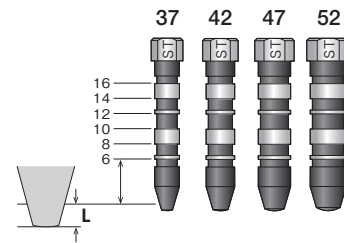


タップフォーマー TP

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
φ3.6	TAP FORMER-TP-37	BCDI11183
φ4.1	TAP FORMER-TP-42	BCDI11184
φ4.6	TAP FORMER-TP-47	BCDI11185
φ5.1	TAP FORMER-TP-52	BCDI11186

単位:mm

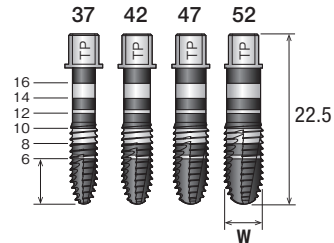


タップフォーマー ST

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
φ3.6	TAP FORMER-ST-37	BCDI11193
φ4.1	TAP FORMER-ST-42	BCDI11194
φ4.6	TAP FORMER-ST-47	BCDI11195
φ5.1	TAP FORMER-ST-52	BCDI11196

単位:mm

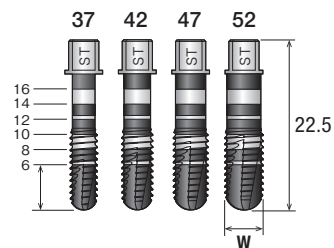


ドリルエクステンダー

コントラハンドピースに装着する器具に対して、隣在歯等が障害となった場合あるいは部位により高径が不足となった場合に装着して使用します。

商品名	商品コード
DRL EXTENDER	BCDI11235

単位:mm

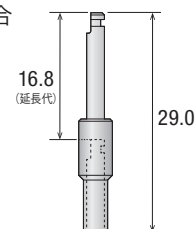


プロファイルドリル

FINESIA TLインプラントのカラー部の形状に合わせてインプラント床を形成するために使用します。

L	商品名	商品コード
25.3	PROFILE DRL37RP-S	BCDI11220
35.3	PROFILE DRL37RP-M	BCDI11221
25.5	PROFILE DRL42RP-S	BCDI11222
35.5	PROFILE DRL42RP-M	BCDI11223
25.6	PROFILE DRL47RP-S	BCDI11226
35.6	PROFILE DRL47RP-M	BCDI11227
25.6	PROFILE DRL47WP-S	BCDI11228
35.6	PROFILE DRL47WP-M	BCDI11229
25.8	PROFILE DRL52WP-S	BCDI11230
35.8	PROFILE DRL52WP-M	BCDI11231

単位:mm

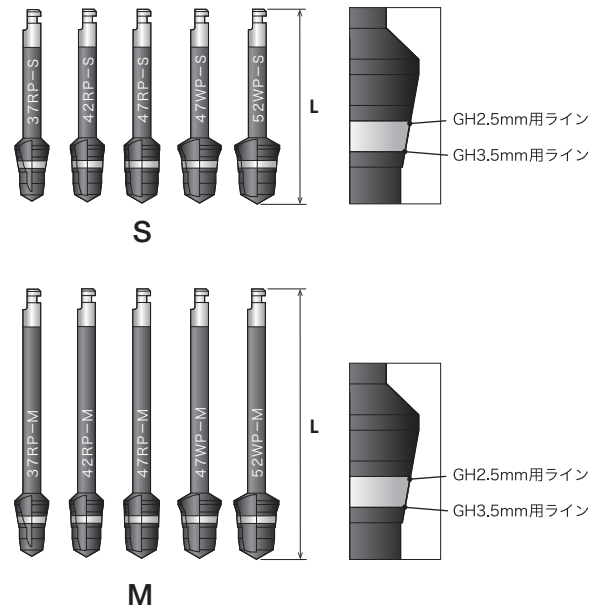


TLインプラントドライバーCH

TLインプラントをキャリングならびに埋入するために使用します。

商品名	商品コード
FTL-I DRIVER-S-CH	BCDI11410
FTL-I DRIVER-L-CH	BCDI11411

単位:mm

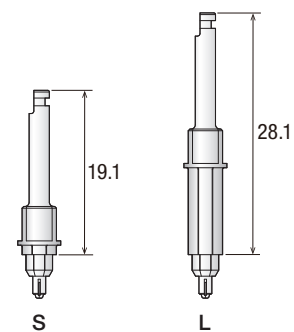


TLインプラントドライバーWH

DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着し、使用します。
TLインプラントをキャリングならびに埋入するために使用します。

商品名	商品コード
FTL-I DRIVER-WH	BCDI11412

単位:mm

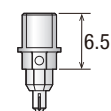


ヘキサロビューラドライバー CH

コントラハンドピースまたは CHアダプタに装着し使用します。
各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
16.0	HEXALO DRIVER-XS-CH	BCDI11240
20.0	HEXALO DRIVER-S-CH	BCDI11241
24.0	HEXALO DRIVER-M-CH	BCDI11242
28.0	HEXALO DRIVER-L-CH	BCDI11243

単位:mm

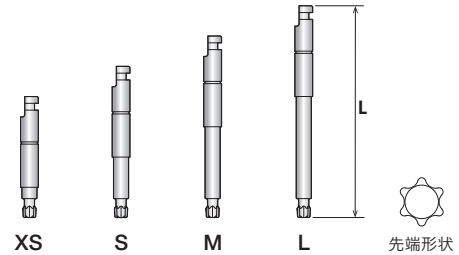


ヘキサロビューラドライバー SH

各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.0	HEXALO DRIVER-XS-SH	BCDI11244
8.0	HEXALO DRIVER-S-SH	BCDI11245
12.0	HEXALO DRIVER-M-SH	BCDI11246
16.0	HEXALO DRIVER-L-SH	BCDI11247

単位:mm

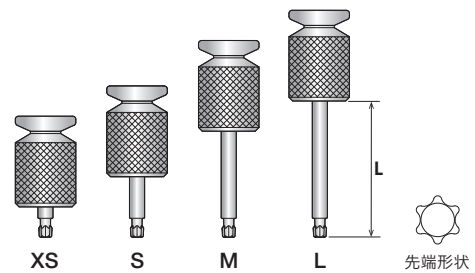


ヘキサロビューラドライバー WH

FDアダプタ、DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着し使用します。
各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.5	HEXALO DRIVER-XS-WH	BCDI11248
6.5	HEXALO DRIVER-S-WH	BCDI11249
8.5	HEXALO DRIVER-M-WH	BCDI11250
12.5	HEXALO DRIVER-L-WH	BCDI11251

単位:mm

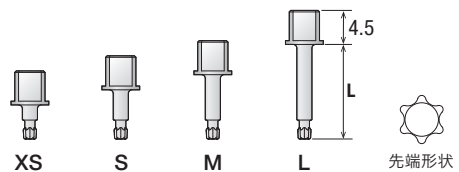

ヘキサロビューラドライバー CH/SH/WH に使用するパーツ


- トランスファーコーピング用スクリュー
- カバースクリュー
- シリンダースクリュー
- アングルラボスクリュー
- ヒーリングアバットメント
- マウントスクリュー
- スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリュー
- ダイレクトアバットメント
- アバットメントスクリュー
- ラボスクリュー
- スプリントアバットメント用ラボスクリュー
- アングルアバットメントスクリュー
- インプレッションポスト用スクリュー

トルクレンチ

FDアダプタ、DAアダプタまたはCHアダプタを装着してインプラント体の埋入に使用します。
インプラント体埋入時のトルクが確認できます。

商品名	商品コード
TORQUEWRENCH	BCDI11286

単位:mm

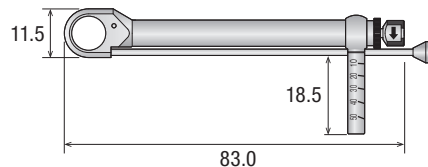


FD アダプタ

ヘキサロビューラドライバ－WH、インプラントドライバ－を装着し、トルクレンチで使用します。

商品名	商品コード
FD ADAPTER	BCDI11289

単位:mm

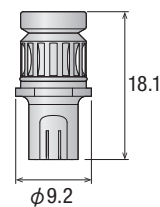


DA アダプタ

ヘキサロビューラドライバ－WH、インプラントドライバ－を装着し、トルクレンチで使用します。

商品名	商品コード
DA ADAPTER	BCDI11287

単位:mm

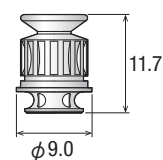


※ドライバ－ホルダ－Cリングが別途必要になります。

CH アダプタ

ヘキサロビューラドライバ－CHを装着し、トルクレンチで使用します。

商品名	商品コード
CH ADAPTER	BCDI11288

単位:mm

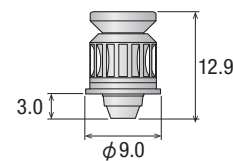


トルクレンチセット

トルクレンチ本体、DAアダプタのセットです。

商品名	商品コード
TORQUE WRENCH SET	BCDI11290

単位:mm

※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。

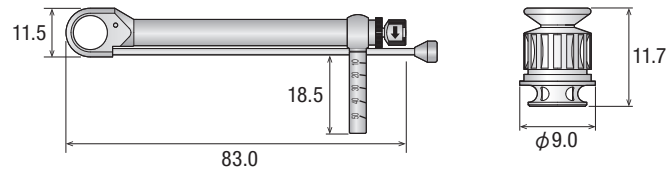


ドライバーホルダー

ヘキサロビューラドライバーWH、BLインプラントドライバーWHに装着し使用します。

商品名	商品コード
DRIVER HOLDER	BCDI11295

単位:mm

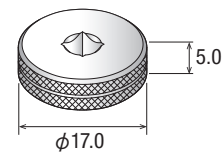


ドライバーエクステンダー

インプラント体の植立、埋入時に隣在歯等が障害となった場合、DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着して高径を確保します。

商品名	商品コード
DRIVER EXTENDER	BCDI11296

単位:mm

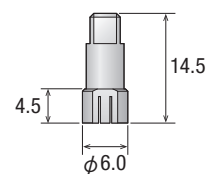


ドライバーホルダー C

コントラハンドピースに装着してインプラント体の埋入に使用します。

H	商品名	商品コード
21.1	DRIVER HOLDER C-S	BCDI11275
29.1	DRIVER HOLDER C-L	BCDI11276

単位:mm

(ドライバーホルダーCリング10個入)

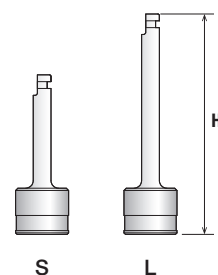

ドライバーホルダー C リング

ドライバーホルダーCに装着して使用します。

商品名	商品コード
DRIVER HOLDER C RING	BCDI11277

(30個入) 単位:mm




F-DA ホルダー

TLのマウントを除去する際、マウントの上部に装着して把持します。

商品名	商品コード
F-DA HOLDER	BCDI11285

単位:mm

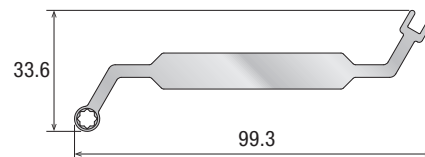


スプリントアバットメント用ドライバー

TLスプリントアバットメントの締結に使用します。

商品名	商品コード
FTL-SP DRIVER-RP-CH	BCDI11320
FTL-SP DRIVER-WP-CH	BCDI11321

単位:mm

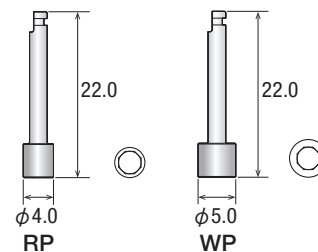


ボールアバットメントキャリアー

ボールアバットメントの運搬に使用します。

商品名	商品コード
F-BALL AB CARRIER	BCDI11311

単位:mm

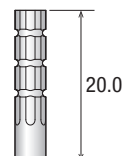


ボールアバットメントドライバー

ボールアバットメントの締結に使用します。

商品名	商品コード
F-BALL AB DRIVER-CH	BCDI11310

単位:mm

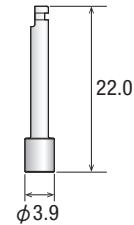


スクリーリムーバー

過大な外力等により、アバットメントスクリューが破損し、インプラント体内部に残存したアバットメントスクリューの除去に使用します。

商品名	商品コード
SCREW REMOVER	BCDI11309

単位:mm

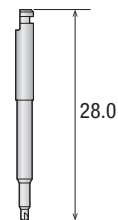


アバットメントリムーバー

TLインプラント用のアバットメント自体に損傷が無くアバットメントがインプラント体と強固に密着して取り外しが困難な場合の取り外しに使用します。

商品名	商品コード
FTL-AB REMOVER	BCDI11346

単位:mm

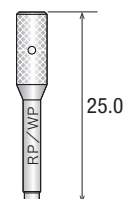

ロケータ関連


単位:mm

φ3.7/4.2/4.7 (RP) ・ φ4.7/5.2 (WP) 共通

LOCATOR アバットメントドライバー-S

LOCATOR用の締結ドライバーです。


商品名	商品コード	
LOC AB DRIVER-S	BCD111505	(未滅菌 1個入)

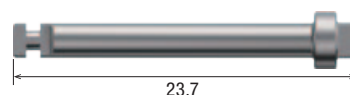

LOCATOR アバットメントドライバー-L

LOCATOR用の締結ドライバーです。

商品名	商品コード	
LOC AB DRIVER-L	BCD111506	(未滅菌 1個入)

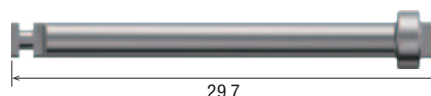

LOCATOR アングルメジャーガイド

インプラント間の角度(平行性)を計測します。

商品名	商品コード	
LOC AN MES GUIDE	BCD111502	(未滅菌 1個入)



LOCATOR パラレルポスト

インプラント間の角度(平行性)を計測します。

商品名	商品コード	
LOC PAL POST 4P	BCD111501	(未滅菌 4個入)



LOCATOR コアツール

LOCATOR リプレースメントメールを着脱するためのツールです。

商品名	商品コード	
LOC CORE TOOL	BCD111500	(未滅菌 1個入)



LOCATOR ホールドスリーブ

LOCATOR コアツールに装着するアバットメントホルダーです。

商品名	商品コード	
LOC HOLD SLEEVE 4P	BCD015206	(未滅菌 4個入)



LOCATOR 印象コーピング

LOCATOR用の印象キャップです。

商品名	商品コード	
LOC IMP CAP 4P	BCD015202	(未滅菌 4個入)



LOCATOR フィメールアナログ

LOCATOR用のアナログです。

商品名	商品コード	
LOC ANALOG 4P	BCD015200	(未滅菌 4個入)



LOCATOR プロセッシングスペーサー

LOCATOR デンチャーキャップを義歯に装着する際に使用するブロックアウト用のスペーサーです。



商品名	商品コード	
LOC PR SPACER 4P	BCD015204	(未滅菌 4個入)



サージカルケース

STあるいはTPのBL、TL、1Pのインスツルメントが収納できます。


商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE	BCDI12000

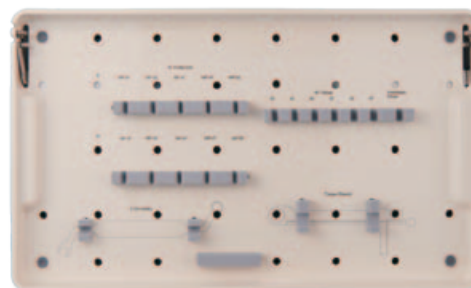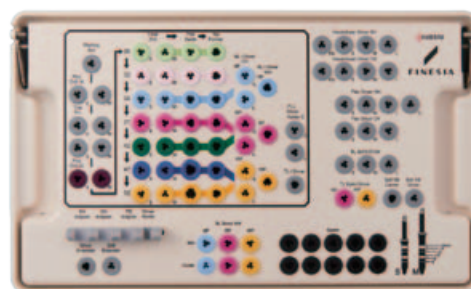

サージカルケース S

使用頻度の高いインスツルメントを選択して収納できます。


商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE-S	BCDI12001

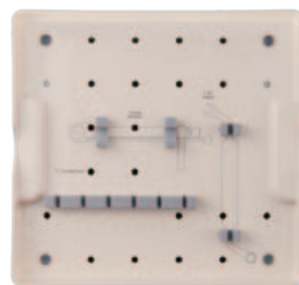

プロステティックケース

二次手術以降に使用するインスツルメントを収納できます。

商品名	商品コード
F-PROSTHETIC CASE	BCDI12003

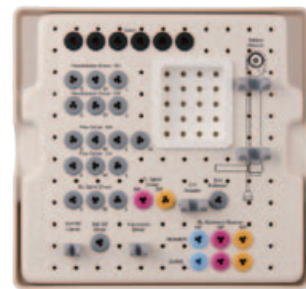

ストッパーケース

ストッパー全サイズが収納でき、サイズを選択と装着が容易になります。

商品名	商品コード
F-STOPPER CASE	BCDI12002



ストッパーピックアップ

ファイナルドリルストッパーを把持し、運搬する際に使用します。

商品名	商品コード
F-STOPPER PICK UP	BCDI12005



本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／認証／届出番号を取得しています。

販売名	分類	一般的名称	承認 / 認証 / 届出番号	クラス分類
FINESIA T Lフィクスチャー ファイナフィックス	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	22800BZX00037000	Ⅲ
FINESIA T Lフィクスチャー ファイナタイト	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	22800BZX00038000	Ⅲ
FINESIA T Lアバットメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントアバットメント	22800BZX00039000	Ⅲ
FINESIA T Lチタンベースアバットメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントアバットメント	22900BZX00061000	Ⅲ
FINESIA T Lロケーターアバットメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントアバットメント	23000BZX00354000	Ⅲ
KM- ロケーターアタッチメント	管理医療機器	歯科用精密弾性アタッチメント	231ADBZX00021000	Ⅱ
KM- ロケーターツール	一般医療機器	歯科インプラント補綴用器具	26B1X10019110101	Ⅰ
FINESIA インプラント用手術器具	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	26B1X10019101122	Ⅰ
FINESIA 技工用器具	一般医療機器	歯科インプラント技工用器材	26B1X10019102114	Ⅰ
FINESIA 印象採得用器具	一般医療機器	歯科インプラント技工用器材	26B1X10019102115	Ⅰ
歯科用トルクレンチ	一般医療機器	手術用レンチ	26B1X10019108103	Ⅰ
ドライバーホルダー C	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	26B1X10019106106	Ⅰ
A Bスクリーリムーバー	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	26B1X10019106102	Ⅰ
リムーバーキット	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	26B1X10019106107	Ⅰ
アタッチメントリムーバー	一般医療機器	ドライバ及び拔出器	13B2X00094000227	Ⅰ

製造販売元：京セラメディカル株式会社
株式会社デンテック

京セラメディカル株式会社

<https://www.kyocera-medical.co.jp>

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.fnesia.world

「FINESIA」は京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2025年10月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。